

milca LED

LED 視力表 ミルカⅡ



www.inami.co.jp

 Find us on Facebook!
www.facebook.com/inami.co.jp



環境にやさしく、経済的なLED視力表

光源に採用したLEDは、長寿命のため、交換の必要がほとんど無く、診察途中で電球が切れる心配や、煩雑な予備電球管理の手間を軽減します。また、省電力、低発熱性はもちろん、紫外線などの有害な光線を限りなくゼロに抑えているため、経済的にも、患者様にも、環境にも「やさしい」視力表となっております。

分かりやすい乱視用楔形チャート

乱視検査の分かりやすさを追求し、ドットラインを最適な大きさに設定いたしました。また、ラインの中心付近をより細くデザインすることで、各ライン内における線の濃さが不均衡に見えてしまうという現象を克服し、より正確な乱視測定が可能となりました。

豊富なバリエーション

豊富なバリエーションから最適なモデルをお選びいただけます。


【光源色】白色 / 電球色

【字詰まり視標】全5パターン

【測定距離】5m / 3m

【立体視視標】あり / なし ※オプション取付も可能です。

豊富な視標パネル

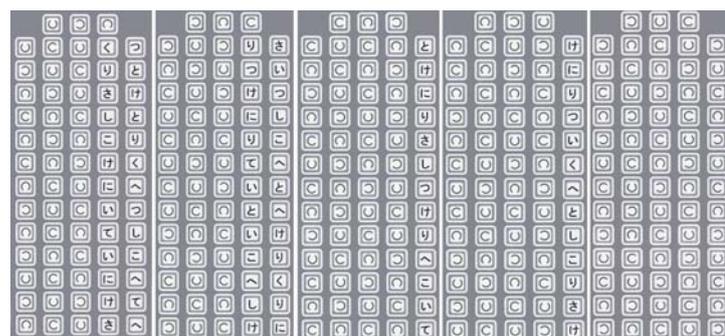

かな 2列 かな 2列 かな 1列 かな 1列 全ラウンドル環

5m	P0-A-Z0121-0004-A5	P0-A-Z0121-0004-C5	P0-A-Z0121-0004-D5	P0-A-Z0121-0004-E5	P0-A-Z0121-0004-F5
3m	P0-A-Z0121-0031-A3	P0-A-Z0121-0031-C3	P0-A-Z0121-0031-D3	P0-A-Z0121-0031-E3	P0-A-Z0121-0031-F3

※3m用は受注生産となります。

■ K-3800 LED視力表 ミルカII Wシリーズ(白色)

型番	LED色	立体視	付属リモコン	価格
K-3800A	白色	なし*1	コントロールボックス	¥ 498,000
K-3800B			ハンディリモコン	
K-3800C			キャビネット引出し収納型	¥ 518,000
K-3800A-1		あり*2	コントロールボックス	¥ 598,000
K-3800B-1			ハンディリモコン	
K-3800C-1	キャビネット引出し収納型		¥ 618,000	

*1 オプション取付可能

*2 立体視眼鏡付属

■ 視標/パターンは5種類からお選びいただけます。(3m用は受注生産)

■ K-3801 LED視力表 ミルカII Yシリーズ(電球色)

型番	LED色	立体視	付属リモコン	価格
K-3801A	電球色	なし*1	コントロールボックス	¥ 498,000
K-3801B			ハンディリモコン	
K-3801C			キャビネット引出し収納型	¥ 518,000
K-3801A-1		あり*2	コントロールボックス	¥ 598,000
K-3801B-1			ハンディリモコン	
K-3801C-1	キャビネット引出し収納型		¥ 618,000	

*1 オプション取付可能

*2 立体視眼鏡付属

■ 視標/パターンは5種類からお選びいただけます。(3m用は受注生産)

■ オプション

型番	製品名	価格
K-0156	L型視力装置用スタンド	¥ 34,400
K-3437C	コントロールボックス架台	¥ 15,000
K-38-5	立体視パネル	¥ 150,000

■ 本体仕様

* K-3800A/B/C、K-3801A/B/Cはオプション

型式	K-3800シリーズ	K-3801シリーズ
光源	高輝度LED 5V(白色)	高輝度LED 5V(電球色)
消費電力	90VA	
視標投影面照度	3000Lux(最大値)	
操作方式	赤外線コントロール方式	
視力値点灯方式	個別点灯、横一列点灯、縦一列点灯、全点灯	
視力値	0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (14ステップ)	
視標	赤緑、乱視用点群、乱視視標、固視点、立体視*	
寸法(mm)	450(W)×60(D)×1210(H)	
重量	14kg	

■ L型視力装置用架台仕様

ベース部寸法(mm)	430(W)×435(D)
高さ(mm)	4段階調節 1630, 1680, 1730, 1780(H)

■ リモートコントロール仕様




	コントロールボックス	ハンディリモコン	キャビネット収納型
寸法(mm)	W182×D246×H85*	W83×D221×H43	W207×D350×H50
使用電池	単3型アルカリ乾電池 6V (4本)		
重量	約1kg	約290g	約1.5kg
方式	赤外線コントロール方式		

* 架台部寸法: H94 / ベース部 W350


■ 重量に電池は含んでおりません。

milca LED



LED 視力表 ミルカⅡ

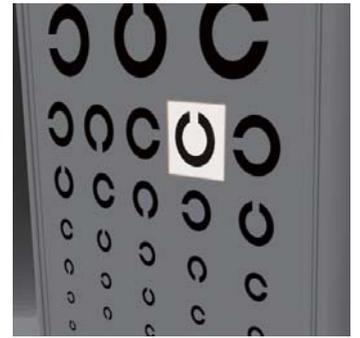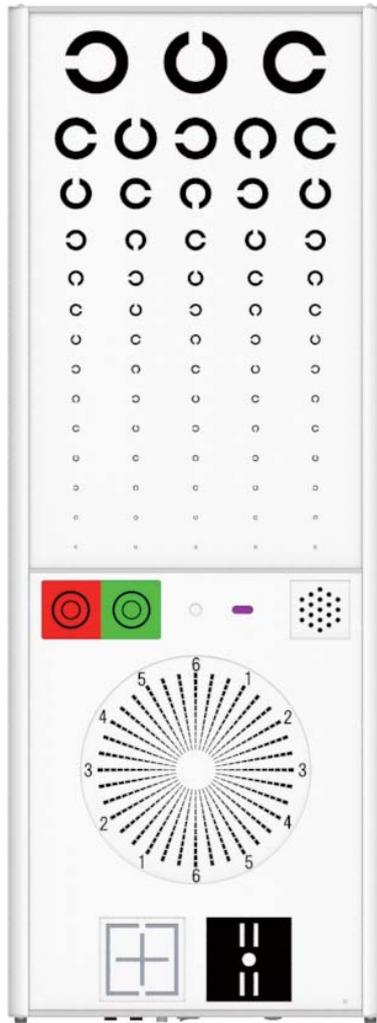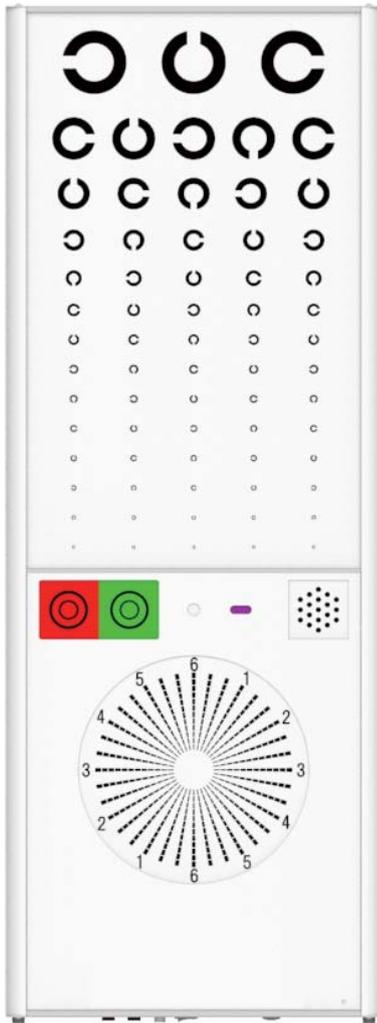

白色

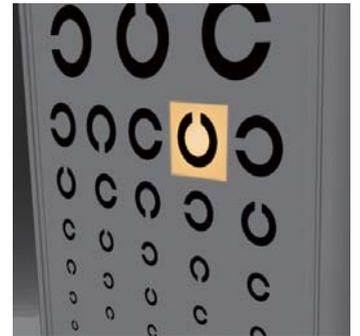

電球色

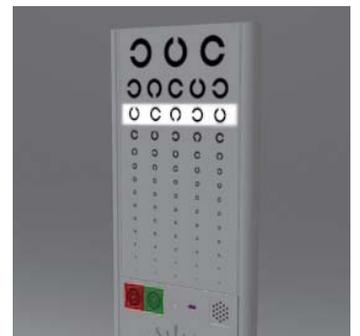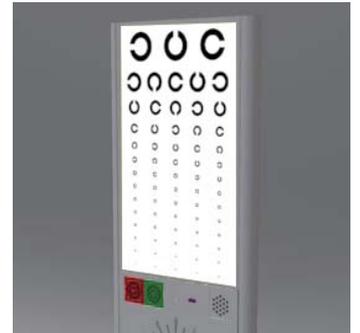



株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市名東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※本カタログ記載価格は、すべて2015年10月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。