



icare
HOME

IOP SELF-MONITORING

ANYWHERE, ANYTIME

TA022 アイケアHOME手持眼圧計

**NO ANESTHESIA
NO AIR PUFF**



BRAND NEW **icare** HOME

アイケアHOME手持眼圧計が、時と場所を選ばない眼圧測定を可能にします。

- ・ シンプルな操作で精度の高い眼圧自己測定が可能です。日内変動のモニタリングが身近なものになります。
- ・ フロープは滅菌されたディスポーザブルタイプ。角膜への接触もソフトで点眼麻酔の必要はありません。

KEY FEATURES

主な特徴



icare アイスマート

測定眼自動識別機能
測定眼をセンサーが自動で
識別します。



icare イージーポジショニング

測定位置サポート機能
正しい測定位置をLEDランプで
知らせます。



icare モードセレクト

測定モード切替機能
シングル・連続の2つの測定
モードが選べます。


※ アイケアHOME本体には測定値を表示する機能はありません。測定が正しく行えたかどうかはインジケーターが知らせます。

※ アイケアHOME本体に記録された測定値や測定時間などのデータをPCに転送し、PC上で確認・管理します。


眼圧自己測定を、いつでも、どこでも。

- + 日常生活でのリアルな眼圧測定が可能になります。
- + 患者ケアを行うために必要なデータの記録・管理が容易になります。
- + 患者とスタッフ双方の負担軽減につながります。

● 院内での24時間モニタリング

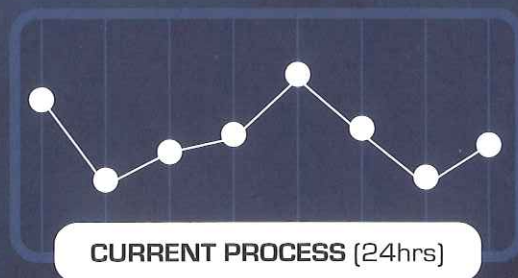

● アイケアHOMEを使用した眼圧自己測定(1日目、2日目、3日目…)

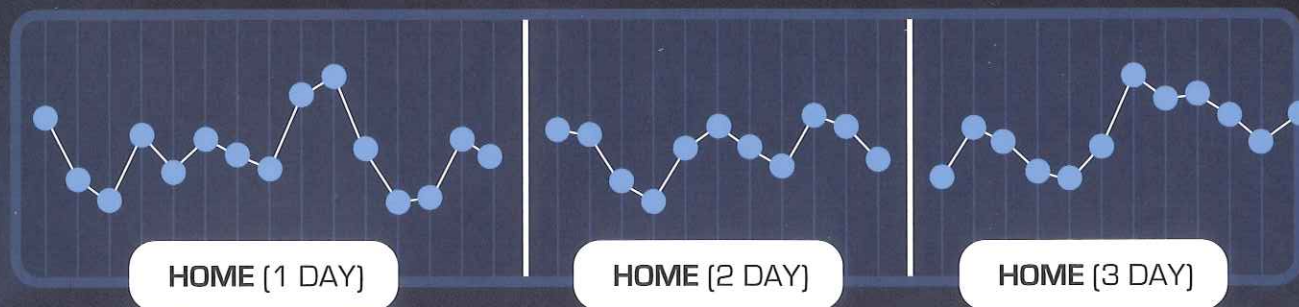

icare LINK

アイケアLINKソフトウェア(日本語対応)

- + アイケアHOME手持眼圧計に保存されたデータを、USB経由でPCに取り込みます。
- + データは患者毎に管理します。グラフ表示で経時的な変動が一目で分かります。
- + データの印刷の他、PDF・XML・エクセル形式で書き出し可能です。
- + データのエクスポート・インポート機能により、複数のPCで同一のデータ管理が可能です。
- + アイケアPROとの併用でより高いレベルでの眼圧管理が可能になります。



※PCは付属していません。

仕様

製品番号	TA022
測定範囲	7~50mmHg
データ保存	1000件
寸法	約11cm×8cm×3cm
重量	約150g(電池込み)
電源	3.0Vリチウム電池CR123A(CR123) 2個
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形機器
医療機器認証番号	224AKBZX00010000
製造業者	アイケア フィンランド社(ICARE FINLAND OY)



TA022 アイケアHOME手持眼圧計 480,000円(税別)

製品構成: アイケアHOME手持眼圧計
滅菌済ディスポーザブルブロープ10本、CR123Aリチウム電池2個、アイケアLINKソフトウェア
USBケーブル、額あてと頬あての位置記録用カード、操作ガイド、取扱説明書、保証書、キャリングケース

消耗品: TA022-1 滅菌済ディスポーザブルブロープ 50本入 12,000円(税別)
TA022-2 ブロープベース 11,000円(税別)



株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4
TEL.03-5395-4588 FAX.03-5395-4866

大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
TEL.06-6479-1707 FAX.06-6479-1708

札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
TEL.011-792-6522 FAX.011-792-6522

福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706
TEL.092-432-3740 FAX.092-432-3741

最新情報はホームページで www.met Technica.co.jp

E-mail: infomet@mettechnica.co.jp

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。

製造販売業許可番号：13B2X00180

201501-1-5000