

グリーンレーザー光凝固装置

IQ 532




IRIDEX CORPORATION
IRIS Medical

見やすく使いやすいコントロールパネルとコントロールダイヤル

光凝固装置本体

- タッチパネルにより、直感的な操作が可能です。
- ダイヤル操作により、ワンアクションで出力・照射時間・休止時間の設定が可能です。
- 各ダイヤルがそれぞれの設定値表示の直下にある、操作が一目で分かります。

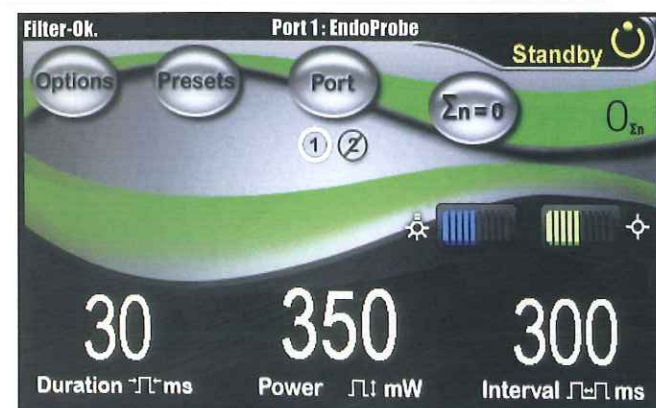

新生児未熟児集中治療室用レーザー光凝固装置として

デュアル倒像鏡デリバリー

- ファイバーと照明電源ケーブルを襟に留めることができるクリップにより、頭部にかかる重量を軽減し、かつ重量バランスを調整できます。

※デュアル倒像鏡デリバリーは以下の製品にもご使用可能です。
グリーンレーザー……オキュライトGL、オキュライトGLx
半導体レーザー……オキュライトSLx、半導体レーザー装置IQ810



眼内光凝固装置として

眼内プローブ／安全フィルター

- レーザー装置本体が小型のため移動がしやすく、手術室での使用が可能です。
- イリデックス社純正眼内プローブが使用可能です。
- 20G、23G、25G、直タイプ、曲タイプ、同軸照明付タイプ、アジャスタブルタイプなど、各種機能別に多彩なタイプをご用意しています。

■眼内プローブ一覧

ニードル最大径	品 名	直/曲	照明タイプ
20G	20G直 ^{※1}	直	—
	20G曲 ^{※1}	曲	—
	20-24G曲 ステップアングル ^{※1}	曲(ステップアングル)	—
	NEW 20G アジャスタブル&インチューイティブ(F) ^{※1}	直&曲	—
	NEW 20G アジャスタブル&インチューイティブ(T) ^{※1}	直&曲	—
	20G直 照明付バヨネット ^{※1}	直	バヨネット
23G	20G曲 照明付バヨネット ^{※1}	曲	バヨネット
	23G直 ^{※1}	直	—
	23-27G曲 ステップアングル ^{※1}	曲(ステップアングル)	—
	NEW 23G アジャスタブル&インチューイティブ(F)	直&曲	—
	NEW 23G アジャスタブル&インチューイティブ(T)	直&曲	—
	23G直 照明付フラッシュチップ ^{※2}	直	フラッシュチップ
25G	NEW 23-27G曲 照明付ステップアングル ^{※2}	曲	フラッシュチップ
	25G直	直	—
	25-30G曲 ステップアングル ^{※2}	曲(ステップアングル)	—
	NEW 25G アジャスタブル&インチューイティブ(F)	直&曲	—
	NEW 25G アジャスタブル&インチューイティブ(T)	直&曲	—
	25G直 照明付フラッシュチップ ^{※2}	直	フラッシュチップ
	NEW 25-27G曲 照明付ステップアングル ^{※2}	曲	フラッシュチップ

※1: 受注発注品です。(納期は最大で1ヶ月です) ※2: 当該プローブはIQ810では使用できません。

□: 照明機能付き

- 安全フィルターは固定式と、故障が少ない手動式をご用意できます。手動式は厚みが薄く、またフィルターは透明に近いため、眼内操作や観察を妨げません。



照明付プローブ用 アダプター

照明付プローブを使用する場合は、各照明装置に対応する専用のアダプターが必要となります。



汎用照明アダプター
アルコン社(アキュラス)、
グリスハーバー社



フォトン用
照明アダプター
シナジェティクス社(フォトン)



ブライトスター用
照明アダプター
ドルク社(ブライトスター、LEDスター)



ステラリス用
照明アダプター
ボシュロム社(ステラリス)

※アルコン社(コンステレーション)に取付けの際には、アダプターは不要です。

仕 様

レーザー発振波長	治療光	532nm(緑)
	照準(エーミング)光	635±5nm(赤)
出 力	治療光	50~2000mW
	照準(エーミング)光	1mW以下
CWパルスモード	照射時間	10~3000ms、60s
	休止時間	10~3000ms
寸法、重量		305mm(W)×356mm(D)×214mm(H)、9kg
電源電圧、周波数、電源入力		AC100V、50/60Hz、300VA
承認番号		22500BZX00168000
医療機器の分類		高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

●デュアル倒像鏡デリバリー

照明光源	本体内蔵
------	------

関連製品(姉妹器)

ピュアイエロー・レーザー光凝固装置
IQ577



オプション

レーザー保護メガネ

IQ577/IQ532/GLx用と
SLx用がございます。
器種をご指定ください。
(写真はIQ577/IQ532/GLx用)



※仕様・外観等は、予告なしに変更する場合があります。

プロフェッショナルな情報はすべてここに

ADEPT+
TOMEY OPHTHALMOLOGY WEBSITE

医療従事者向け情報サイト
アデプトのご案内

最新器械の使用評価やセミナーの動画、症例集や
カタログの閲覧はこちらのサイトをご利用ください。

<http://ophth.tomey.co.jp>



製造販売元

株式会社 トーメーコーポレーション

〒451-0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号

TEL(052)581-5321 FAX(052)581-5626

URL <http://www.tomey.co.jp>

製造元



IRIDEX CORPORATION

IRIS Medical

1212 Terra Bella Avenue Mountain View, California 94043 USA

ご用命は