

LED倒像鏡 単眼 L-3800



www.inami.co.jp



Find us on Facebook!

www.facebook.com/inami.co.jp

医療現場の声をカタチにした結晶

日本の眼科医の先生方と長年培ってきた信頼を礎に、医療現場のニーズを把握し、多くの情報やアイデアを随所に取り入れ、「丈夫で、明るく、使いやすく」を追求した製品です。患者さま、医師の想いを胸に、磨き上げられた技術の結晶とも言える MADE IN JAPAN の製品です。

シャープ&クリアなスポット光

独自の光学設計技術でクリアでムラのない照野を実現しました。その光はシャープな輪郭で、眼底像を確実に捉えることを可能にしました。


患者さま品質にこだわった LED 技術

患者さまの目に優しいというスタンスを徹底的に貫き、400nm 以下の領域の光を軽減し電球色に近い LED を採用。患者さまにも、医師にも、地球にも優しい検眼鏡が実現されました。

優れた操作性、安全性、管理面

- EOG滅菌(40℃～60℃)が可能です。
- 本体質量が220Gと軽量化を実現しました。
- ACTランス式のため、バッテリー切れの心配がありません。
- 連続点灯でご使用いただいても本体は熱くなりません。

倒像鏡搭載 LED の特性

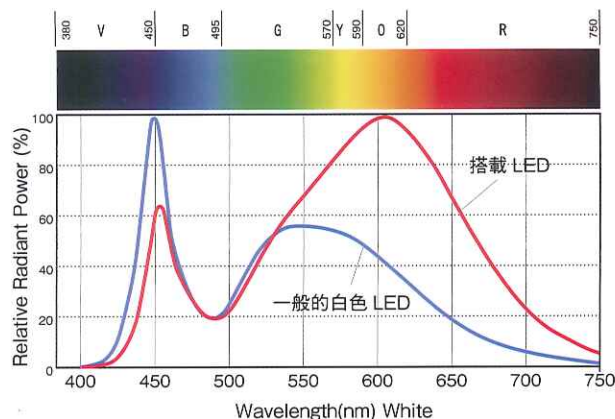

LED検眼鏡のライトハザードは JIS T 7332 の限度値を超えない設計となっています。搭載するLEDは、一般的な白色LEDと比べ、網膜光障害や羞明感の原因とされる短波長の相対エネルギーが低く、黄色から赤の長波長の相対エネルギーが高い特徴があります。の相対エネルギーが高い特徴があります。網膜のオレンジ、視神経乳頭の黄色です。LED検眼鏡に搭載するLEDの色温度はハロゲン電球と同等の200Kです。電球タイプと比べても違和感のない眼底観察を実現しました。

L-3800

LED 倒像鏡 単眼



主な仕様

内容	L-3800本体、コード
光源	3W型LED
点灯時電力	DC3.2V 0.7W
フィルタ	UV、赤、無赤、コバルトブルー、1/2ND
照野径	φ15～60mm連続可変(プリズムから500mmの位置)
本体寸法	φ52mm×251mm(H)
本体質量	220g

価格 (税別標準小売価格)

L-3800	LED倒像鏡 単眼	¥ 122,000
LPS-250	LED倒像鏡用トランス	¥ 52,000
PSU-S	LPS-250用スタンド	¥ 25,000

卓上、壁掛けに対応

専用トランス(LPS-250)は壁掛ハンガーが付属しているため、卓上、壁掛けのどちらでも対応が可能です。卓上使用の場合は、専用スタンド(PSU-250)を使用することでスッキリと設置することが可能です。壁掛けや、専用スタンドでは、LED 照明の ON/OFF に連動するハンガースイッチが使用できます。



イナミスライディングテーブルとの連携で更に便利。

イナミスライディングテーブルタクタスに標準装備されている専用のジャックに差し込むだけで電源が供給され、すぐに使用することが可能です。タクタスオプション品の専用収納ポケットに収納すれば置き場所にも困らず便利です。



Inami 株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市名東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※ 本カタログ記載価格は、すべて2012年10月現在の税別標準小売価格となっております。
※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※ 製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※ 本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。

製造販売許可番号 13B1X00048