

Patient Chair

Libertis ORC FLAT イナミ電動患者椅子シリーズ



「オールコードレス」という発想

これからの診療施設を思い描くとき、そこには何があるべきでしょうか。
この答えを探し、実現するため、私たちは患者椅子の在り方に注目しました。

そしてたどり着いた「オールコードレス化」がもたらすのは、
より美しく、安全で、フレキシブルな診療スペース。

コードから自由になった電動患者椅子が、
診療施設の未来をつくるお手伝いをします。



 **Libertis**

コードレス電動患者椅子リバティス

清潔で美しい施設。


フロアからわずらわしいコードがなくなることで、患者様にクリーンな印象を与えられることはもちろん、清掃がしやすくなるため、診療空間を清潔に保つことがより容易になります。

安心・安全な空間。

足もとにコードが這っている状態は、つまずきや転倒など、患者様やドクターにとってのリスクを高めます。「オールコードレス化」はこれらを未然に防ぐことができます。また車椅子のスムーズな移動にも有効です。

自由なレイアウト。

「リバティス」はコンセント位置の制約を受けず、またコードのためのスペース確保の必要がないため、設置場所にとらわれることなく、自由に診療施設のレイアウトを行うことができます。

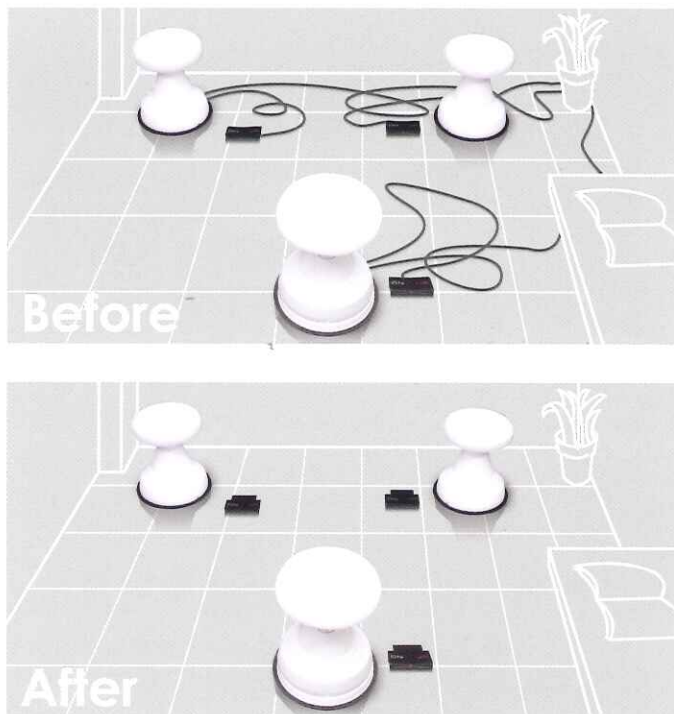

スムーズな診療をサポート

超高感度の無線通信

医療機器に最適な電波による無線通信規格を採用。従来の赤外線通信と比較し、超高感度の遠隔操作が可能となりました。リモート送受信間の障害物にほぼ全く干渉されないため、フットスイッチの場所を選ぶこともありません。更にフットスイッチ操作と昇降の時間差もないため、スムーズでストレスのない診察が可能です。

※国内電波法認証取得済み、海外電波法対応（FCC/CE認証取得済み）

複数送信コードで誤作動防止

「リバティス」は送信コードを制限なく持つことが可能なため、複数台を同時に使用する場合でも誤作動を起こすことなく、安全に操作することができます。送信コードはあらかじめそれぞれの椅子とフットスイッチを関連付けます。

ハイパワー&エコを実現

一日360診をカバー

連続動作時間60分のハイパワーバッテリーを搭載（待機時間含まず）。また、1回の診察に必要な位置調整を10秒程度とすると、1日につき約360回の診察をカバー可能な耐久性を備えています。

オート節電モードでバッテリー長持ち

待機時間が30秒を経過すると自動的に節電モードに入り、電力消費がストップします。このため、待機時間中にバッテリーを消耗することはありません。

ストレスフリーな急速充電

バッテリーの残量がなくなった状態から約10時間で充電が完了するスピードチャージ設計を採用しています。これによって診察終了後に充電を始めても、ストレスなく翌日の診療を行うことができます。

充実したセーフティ機能

充電残量警告アラーム搭載

バッテリーの残量がわずかになると、警告ランプおよびアラームが作動します（フットスイッチ操作時）。

充電しながらの操作が可能

バッテリー残量が僅かになった際、付属のAC電源と接続し、充電しながら使用することが可能です。

施設に合わせて選べるタイプ

FLAT FLAT フラット、フラット・プラス

安定感を重視した広い座板が特徴の角座タイプ。安心の座り心地を提供します。また、「フラット・プラス」シリーズは座板が70mm前方にスライドするため、さらに診療が受けやすい仕様です。

ARC アーク

シンプルなフォルムが美しい丸座タイプ。場所を選ばず、より自由な配置が可能です。



	オールコードレス	リモートのみコードレス	リモート・電源ともに有線
ARC 丸座患者椅子	K-1800II リバティス・アーク	K-1830D リバティス・アーク チャージレス	K-1574 アーク
FLAT 角座患者椅子	K-1600 リバティス・フラット	K-1630D リバティス・フラット チャージレス	K-1471 フラット
FLAT+ 座面スライド機能付 角座患者椅子	K-1600S リバティス・フラットプラス	K-1630SD リバティス・フラットプラス チャージレス	K-1471S フラットプラス

Charge Less

COMING SOON

K-1830D、K-1630D、K-1630SDはリモートのみが無線、電源は従来通りのACタイプです。すでに患者椅子の近くにコンセントをご用意されている施設ではこちらのシリーズがお得です。

各モデルのパネル

リバティス・フラット（フロント）



リバティス・アーク（リア）



リバティス・フラット（リア）



直感的な操作感のリモート

細部にこだわったフットスイッチ

踏み込みと椅子の上下動を自然な感覚で結びつけ、オペレーションを確実にするため、フットスイッチの形状設計及び感度設定を最適化しています。



デザイン、機能、コストパフォーマンス。 様々なニーズに応える充実のラインナップ。

施設にとって最適なスペックをお届けするため、角座タイプの「フラット」、丸座タイプの「アーク」それぞれに豊富な選択肢をご用意しました。どのモデルにも、診療を知るメーカーならではの工夫が詰まっています。

患者椅子のスタンダードシリーズ、「フラット」。

ワイドな座面と最適な腰当てのスプリングが快適な診療をサポートする、角座タイプの「フラット」シリーズは、施設を選ばないスタンダードな外観に加え、お子様からお年寄り、さらに介護者様と来院される患者様まで考慮したユニバーサルなデザインが特徴です。

患者様視点のファンクション

サポート用フットスイッチ

介護者様と来院される患者様やスタッフのサポートを必要とされる患者様に配慮し、リアに内蔵型フットスイッチを搭載しています。



座板の前後スライド機能

「フラットプラス」シリーズの特徴である座板の前後スライド(70mm)は、お年寄りや体の不自由な方が楽な姿勢のまま受診できるよう開発されました。



90度ごとの回転クリック

座板の回転90度ごとにクリックを設けているため、患者様が診察の際に確実にドクターと向き合うことができます。また、不必要な回転を防ぐため、安全です。

すっきり足もとにも対応

「足もとをよりすっきりとさせたい」というご要望にお応えするため、「フラット」(K-1471S)の脚部にはスリムタイプのデザインを採用しています。



価格・仕様

	COMING SOON		COMING SOON			
	K-1800 リパティス・フラット	K-1630D リパティス・フラット チャージレス	K-1471 フラット	K-1600S リパティス・ フラットプラス	K-1630SD リパティス・ フラットプラス チャージレス	K-1471S フラットプラス
標準価格(税別)	¥240,000	¥210,000	¥155,000	¥255,000	¥225,000	¥170,000
製品詳細	角座 オールコードレス	角座 リモートのみ コードレス	角座 有線	角座 オールコードレス 座面スライド機能付 リモートのみ コードレス	角座 有線 座面スライド機能付 リモートのみ コードレス	角座 有線 座面スライド機能付
座面サイズ	幅:430mm 奥行:400mm	幅:430mm 奥行:400mm	幅:430mm 奥行:400mm	幅:430mm 奥行:400mm	幅:430mm 奥行:400mm	幅:430mm 奥行:400mm
高さ	680-820mm	680-820mm	680-820mm	705-845mm	705-845mm	705-845mm
重量	21kg	14.5kg	14kg	23kg	16.5kg	16kg
上下ストローク	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm
前後スライド	-	-	-	70mm	70mm	70mm
作動方法	昇降装置付 アクチュエータ	昇降装置付 アクチュエータ	昇降装置付 アクチュエータ	昇降装置付 アクチュエータ	昇降装置付 アクチュエータ	昇降装置付 アクチュエータ
最大荷重	120kg	120kg	120kg	120kg	120kg	120kg
充電時間	10H	10H	-	10H	10H	-



標準色 L-2735


カラー: L-2735

ご注文時に色のご指定がない場合は標準色にての納入となります。

ーランク上の安定感

私たちの経験と実績によって完成したフォルムはそのままに、一歩先を行く座り心地と安定感を目指して座板の設計を見直しました。

着座時のクッション性と適度な反発のバランスを考慮し、従来より厚手の素材を採用。さらに座面をワイドにするなど、これまで以上にユーザー目線に立った、椅子としての高品質を実現しました。

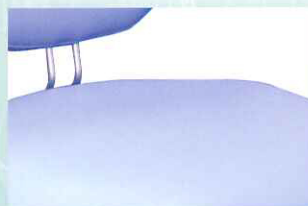

縫い目をなくした均一な座面は、清掃や消毒がしやすく、EKCなど感染の可能性がある疾患の対応に配慮しています。



すべての電動患者椅子シリーズに採用されているフットスイッチは、その直感的なユーザビリティから高い評価を頂いています。

軽量&ポップな外観の人気シリーズ、「アーク」。

移動や整頓を容易にする軽量設計と、飽きのこないプロダクトデザインが好評の「アーク」シリーズ。

複数台使用に適した高いコストパフォーマンスとシンプルなユーザビリティ、さらにはオプションによる拡張性が施設のマネジメントをサポートします。

使いやすさを追求したデザイン

パワフルなアクチュエータ

コンパクトな設計でありながら、「フラット」シリーズと同等の、耐荷重120kgを誇るアクチュエータを搭載しているため、スムーズな診療が可能です。

省スペース設計で自由な施設レイアウト

複数台を同一空間に配置した場合でも圧迫を感じさせないユニークなデザインを採用しているので、より自由な診療スペースのレイアウトを行うことができます。

全方位からの着席が可能なラウンドフォルム

どの方向からも患者様が着席することができるラウンドフォルムは、診療の流れをスムーズにします。また、診察ごとに座板のポジションを直す手間が不要になります。

オプションも充実

座り心地と安全性を向上させる腰当て、位置調整や施設の整頓の際に便利な「らくらくキャスター」など、機能を拡張することができるオプションをご用意しています（詳細は6ページをご覧ください）。

価格・仕様

	K-1800II リハティス・アーク	K-1830D リハティス・アーク チャージレス	K-1574 アーク
標準価格(税別)	¥208,000	¥178,000	¥135,000
製品詳細	丸座 オールコードレス	丸座 リモートのみ コードレス	丸座 有線
座面サイズ	φ395mm	φ395mm	φ395mm
高さ	435-575mm	435-575mm	435-575mm
重量	18kg	12.5kg	9.5kg
上下ストローク	140mm	140mm	143mm
前後スライド	-	-	-
作動方法	昇降装置付 アクチュエータ	昇降装置付 アクチュエータ	昇降装置付 アクチュエータ
最大荷重	120kg	120kg	120kg
充電時間	10H	10H	-



標準色L-2771

カラー：L-2771

ご注文時に色のご指定がない場合は標準色にての納入となります。



診療空間に彩を。

ドクターと患者様のコミュニケーションの場である診療空間にイナミの「コルディナ」で彩りをプラスしてみませんか？
108色の個性豊かなカラーバリエーションからイメージに合わせた自由な組み合わせが可能です。
一歩先を行く空間マネジメントへ。私たちイナミがお手伝いします。

イナミの「コルディナ」は、セントラルオペレーションシステム、スライディングテーブル、患者椅子などの診療用ファニチャーブランドです。眼科総合メーカーならではの視点と工夫に加え、各診療施設のイメージに合わせたカラーリングを108色のバリエーションからお選びいただけます。

※一部製品を除く。また標準色以外を選ばれる際には別途料金が発生する場合があります。詳細は担当営業、または弊社カスタマーセンターまでご連絡下さい。

■ テーマに合わせたカラーリング例

アーバンモントーン



シック

都会的

落ち着いた

イメージカラーNo. L-2751

パステルピンク



フェミニン

かわいさ

キッズ

イメージカラーNo. L-2712

ポップシトラス



キッズ


明るさ

楽しさ

イメージカラーNo. L-2692

■ 施設内を色で識別

施設内の検査機器の識別や、エリアの分け、患者様を案内する際の目印としてカラーコードは有効な手段です。イナミのコルディナの豊富なカラーバリエーションをぜひご利用下さい。カラーサンプルのお貸し出しも随時行っています。お気軽に担当営業、または弊社カスタマーセンターまでお問い合わせ下さい。

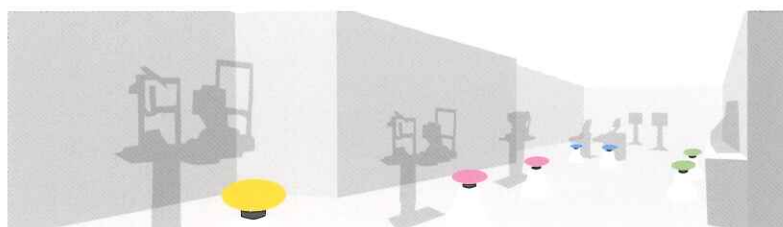

オプション & アクセサリー

Libertis



リバティス専用フットスイッチ(電波式)
K-FS-E 標準小売価格 20,000円(税抜)

- ☐ 誤操作のリスクを軽減するシーソースイッチ
- ☐ リバティス標準付属品(チャージレス含む)

Libertis



リバティス専用バッテリー交換用(2ヶ)
K-1800B 標準小売価格 25,000円(税抜)

- ☐ バッテリー消耗時の交換用
- ☐ 交換作業につきましてはご相談ください




アークシリーズ専用腰あて
K-1575 標準小売価格 10,000円(税抜)

- ☐ より安定した座り心地を提供する専用の腰あて
- ☐ 裏面カラーチャートの108色より選択可能。張替え手数料:5,000円(税抜)




有線患者椅子専用タクトス運動ケーブル
K-1471B 標準小売価格 7,500円(税抜)

- ☐ スライディングテーブルタクトスの手元スイッチから有線タイプの患者椅子の操作を可能とする運動ケーブル
- ☐ リバティスとは接続できません

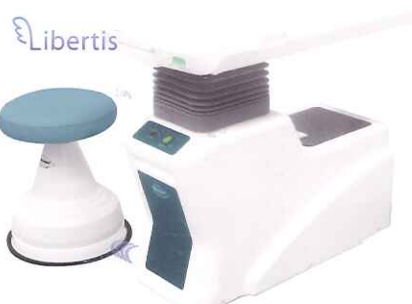

リバティス専用タクトス電波送信器
K-1700DB 標準小売価格 20,000円(税抜)

- ☐ スライディングテーブルタクトス(K-1700,K-1700S)の手元スイッチからリバティスの操作が可能

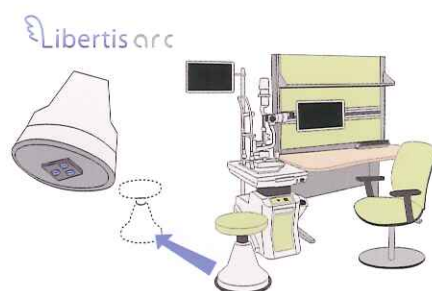


リバティス・アーク専用らくらくキャスター
K-1800K 標準小売価格 35,000円(税抜)

- ☐ 移動がスムーズ
- ☐ 車椅子の患者様の診察にもスムーズに導線を確保
- ☐ 着席時は荷重によりキャスターが収納され固定されます
- ☐ 工場取付オプション

サイズ


K-1600
コードレス電動患者椅子リバティス・フラット

K-1630D
コードレス電動患者椅子リバティス・フラット・チャージレス

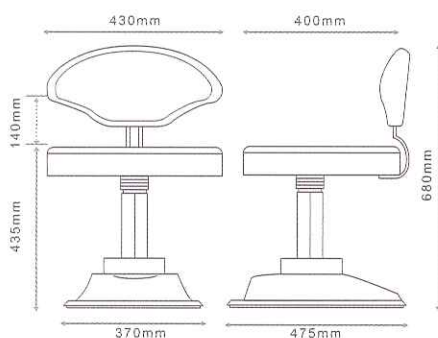


K-1600S
コードレス電動患者椅子リバティス・フラットプラス


K-1630SD
コードレス電動患者椅子リバティス・フラットプラス・チャージレス

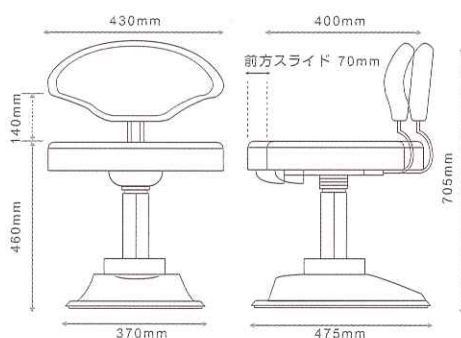


K-1800II
コードレス電動患者椅子リバティス・アーク

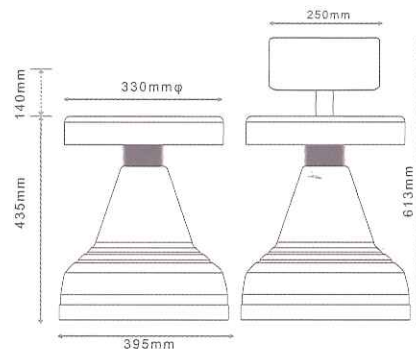

K-1471
電動患者椅子フラット

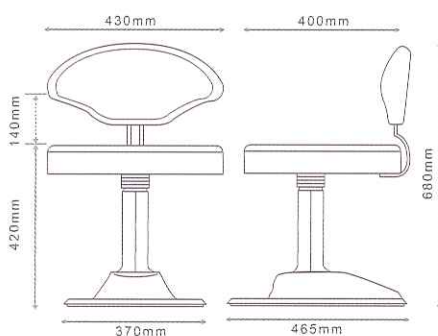

K-1471S
電動患者椅子フラットプラス

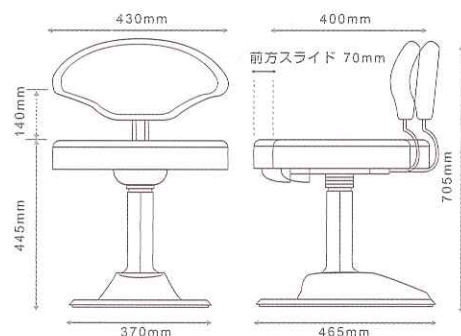

K-1574
電動患者椅子リバティス・アーク

K-1830D
コードレス電動患者椅子リバティス・アーク・チャージレス

