

Keeler

英国 キーラー社

ポータブルスリットランプ

Excellence in optics

# Portable Slit Lamp



アールイーメディカル株式会社  
R E MEDICAL, INC.

届出番号:27B1X00001KPSL01

# 光学機器製造で培った高度なノウハウを凝縮


Keeler

## 精密加工のアルミニウム製本体

軽量で、耐性・強度に優れています。

## 最新の光学技術による高品質画像 (倍率：10x, 16x)

多層コーティングレンズにより、  
優れた鮮明画像が得られます。

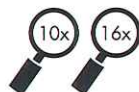

## 調整可能な照明レベル

LED 照明装置は、ダイヤルにより  
無段階に調整可能です。

## 据置型の性能を継承した手持タイプ

前房の炎症等を評価する際に用いる  
1mm×1mm 角や  
LED 固視灯を備えています。



LED固視灯

## 電池の消耗を抑えるオートオフ機能

2 分 30 秒後に自動でオフになり、  
消し忘れや電池の消耗を抑えます。



|               |        |         |          |     |     |    |
|---------------|--------|---------|----------|-----|-----|----|
| スリット<br>ホイール  |        |         |          |     |     |    |
|               | 1x1    | 0.15    | 0.5      | 0.8 | 1.6 | 12 |
| フィルター<br>ホイール |        |         |          |     |     |    |
|               | レッドフリー | コバルトブルー | 中間濃度 0.8 | 無色  |     |    |

| カタログ番号      | 商品名               |
|-------------|-------------------|
| 3010-P-2000 | キーラー ポータブルスリットランプ |

### [別売品]

| カタログ番号      | 商品名                |
|-------------|--------------------|
| 3010-P-7000 | PSL キャリーケース        |
| 1030-P-7195 | PSL LED電球          |
| 3010-P-7004 | PSL Eye カップ (2 個入) |
| EP59-47130  | PSL 予備リチウムバッテリー    |

### ■ 製品仕様

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法   | 本体：H210×W116×D238mm<br>バッテリーチャージャー：H40×W138×D205mm                                    |
| 質量     | 本体：約 900g / バッテリーチャージャー：約 300g                                                        |
| スリット長さ | 12mm                                                                                  |
| スリット幅  | 1mm 角、0.15mm、0.5mm、0.8mm、1.6mm、φ12mm                                                  |
| フィルター  | レッドフリー、コバルトブルー、中間濃度 (0.8)、透明                                                          |
| 赤外線保護  | 赤外線カットフィルター内蔵                                                                         |
| スリット回転 | 左右 60° 無段階                                                                            |
| 光源     | LED 電球                                                                                |
| 固視灯    | LED 2 箇所                                                                              |
| 照明制御   | 無段階可変                                                                                 |
| 連続照明時間 | 約 45 分                                                                                |
| 充電時間   | 2 時間 30 分 (完全放電からの充電時)                                                                |
| 使用電力   | 充電時：100V<br>使用時：30VA、バッテリー使用時 12V DC2.5A                                              |
| 生体顕微鏡  | 収束角度：13°<br>倍率：10×、16×<br>観察視野：16mm (10×) 10.5mm (16×)<br>焦点距離：100mm (10×) 80mm (16×) |

日本総代理店



**アールイーメディカル株式会社**  
R E MEDICAL, INC.

本社：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29  
東京営業所：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル  
名古屋営業所：〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台2-128 パティナ社台  
福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル

●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

[www.re-medical.co.jp](http://www.re-medical.co.jp)

TEL.(06)4794-8220(代)FAX.(06)4794-8222  
TEL.(03)5816-1480(代)FAX.(03)5816-1483  
TEL.(052)760-3955(代)FAX.(052)760-3956  
TEL.(092)437-5180(代)FAX.(092)437-5181