

NEW

リユーザブルタイプに27Gが新登場!

再滅菌後に繰り返し使用可能

滅菌方法は2種

- 過酸化水素低温プラズマ滅菌（ステラッド®）
- エチレンオキサイドガス滅菌

※滅菌の最大許容回数は20回

眼科用内視鏡

プレビット

PreVit Type PV27-2.5k


- 27Gという更に細い一層患者様に優しい
眼内内視鏡になりました
- 従来の顕微鏡下硝子体手術では視野の確保が困難であった
症例（角膜・水晶体混濁、人工水晶体、小瞳孔等）や
部位（網膜周辺部、毛様体、虹彩裏面等）も観察可能です
- 白内障手術においても、虹彩裏面やカプセルの状態の観察に
有用性を発揮します
- 極小切開硝子体手術に使用することが可能です
- 専用のイメージングシステムと組み合わせて使用します

標準仕様

商品番号	タイプ	挿入部最大外径	色	挿入部有効長	全長	視野角
100-3055	PV27-2.5k	0.41mm	茶	25mm	1950mm	70°

■販売名：プレビット
■医療機器認証番号：225AFBZX00150000

接続例

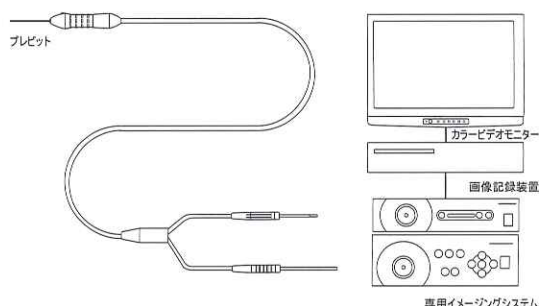

挿入部イメージ図



■仕様・外観については、予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

総代理店



ellex.jp

エレックス株式会社

大阪本社

〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-3-7
理想新大阪ビル 4階
TEL. 06-6396-2250
FAX. 06-6396-2254

東京本部

〒108-0014
東京都港区芝4-11-4
ハラビルII 3階
TEL. 03-5484-7742
FAX. 03-5484-7743

製造販売元

ファイバーテック株式会社

千葉県佐倉市西御門409-1 佐倉リサーチセンター

www.fibertech.jp

DD-UTF0002.04/201501A