

近日発売

Kowa

Technology for Life Science

散瞳・無散瞳一体型眼底カメラ


コーワ VX-20 Retinal Camera

やさしさと使いやすさを
徹底的に追求した斬新なデザイン



デザインを一新 — ストレスフリーな診察へ

被検眼の高さが当社従来機よりも 75mm ダウンして、診察時に無理のない姿勢で撮影が可能になりました。

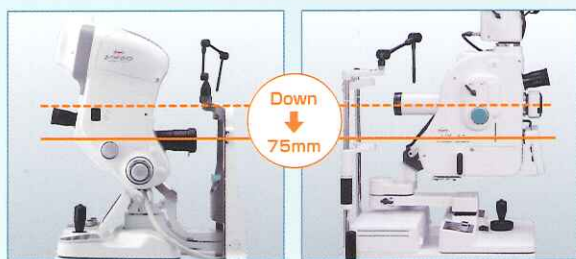

VX-20

VX-10α

撮影機能の拡充 — FAFを加えた5モード搭載

無散瞳カラー・散瞳カラー・蛍光 (FA)・無赤色 (RF) に加え、自発蛍光 (FAF) の5モードでの撮影が可能になりました。また、φ3.5mmの小瞳孔で撮影可能なSPモードを搭載しています。



FAF




無散瞳カラー

簡易画像ファイリング ソフトウェアを標準搭載

簡易画像ファイリング機能を搭載しているので、外部プリンタと直接接続が可能です。

また、画像ファイリングシステムコーワ VK-2 / VK-3 との接続はもちろん、各社電子カルテなどへもネットワーク経由で画像を出力できます。

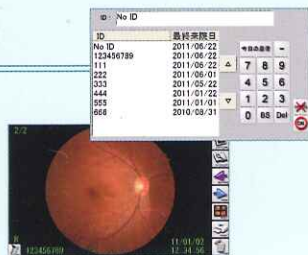

撮影モード	無散瞳カラー・散瞳カラー・蛍光 (FA)・無赤色 (RF)・自発蛍光 (FAF)
画角	散瞳モード時: 50° / 30° 無散瞳モード時: 45° / 27°
撮影可能最小瞳孔径	散瞳モード時: φ5.5mm (SPモード1: φ4.0mm, SPモード2: φ3.5mm) 無散瞳モード時: φ4.0mm (SPモード: φ3.5mm) (RF撮影時にはSPモードは対応していません)
フォーカス調整範囲	補正レンズ無し -12D ~ +13D -レンズ挿入時 -32D ~ -10D +レンズ挿入時 +10D ~ +35D
内部回視灯	後極部 / 視神経乳頭部 / 黄斑部とその周辺 8 点の計 11 点
電源	入力: 100V 50 / 60Hz 消費電力: 250VA, 最大 1500VA
寸法 / 重量	390 (W) × 540 (D) × 720 (H) mm / 39kg

販売名: コーワ VX-20 認証番号: 223AGBZX00125000 特定保守管理医療機器

Kowa

興和株式会社

電機光学事業部

URL: <http://www.kowa.co.jp>

東京 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町 3-4-14
 仙台 〒980-0802 仙台市青葉区二日町 12-21
 名古屋 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-10-37
 大阪 〒541-8511 大阪市中央区淡路町 2-3-5
 福岡 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 4-15

TEL (03) 3279-7334
 TEL (022) 267-1784
 TEL (052) 963-3296
 TEL (06) 6204-6184
 TEL (092) 271-2663