


エルボクライオ冷凍手術装置

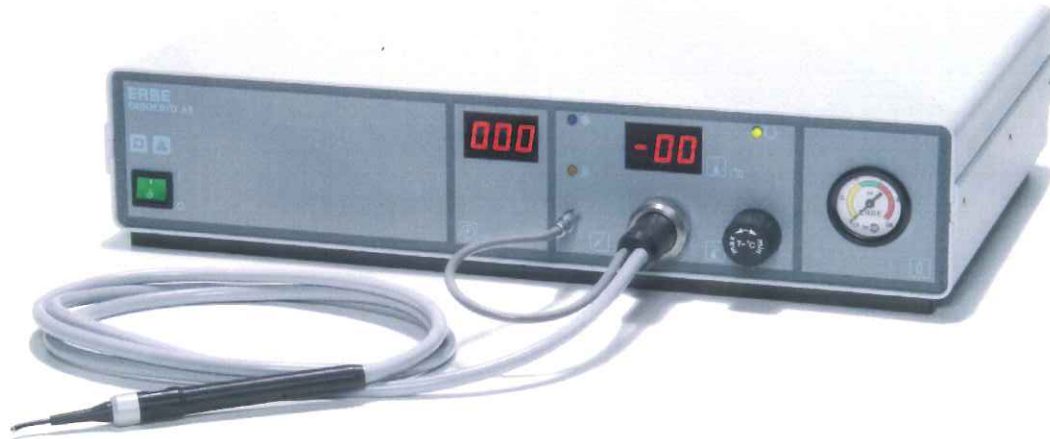

10731-002 冷凍手術装置AE 本体 (50/60Hz 100V) 電源コード付き

特徴

- ジュール・トムソン効果を利用した冷凍手術装置
- 迅速な冷凍及び解凍を実現するエルベ社独自のシステム
- 炭酸ガス (CO₂)、または亜鉛化窒素ガス (N₂O) 使用
- 眼科用温度センサー付プローブではデジタル温度表示
- ボンベアダプターのフィルター及び本体内カートリッジフィルターにより
冷凍不良・解凍不良最大の原因となる塵・ホコリを除去
- 本体前面のツマミにより約 20° の温度調節

10731-002 仕様

- 電源：100V 50/60Hz
- 最大消費電力：40W
- 使用ガス：炭酸ガス (CO₂) 亜鉛化窒素ガス (N₂O)
- 寸法 (mm)：470 (幅) × 330 (奥行) × 110 (高さ)
- 本体重量：8.9Kg

別売品

- 20410-004 高圧ホース
- 20410-008 本体内カートリッジフィルター (5個1組)
- 20731-007 冷凍手術装置専用架台




20711-009 フットスイッチ (非防爆タイプ)

20410-C02 ヨークバルブアダプタ (CO₂用)

20410-003 ボンベコネクター (CO₂用)

20410-005 ヨークバルブアダプタ (N₂O用)

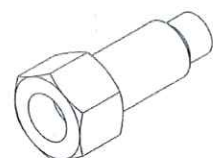

20711-092 網膜剥離用 2.7mm ϕ 60° 温度表示有



20711-089 網膜剥離用 3.0mm ϕ 90° 温度表示有



20711-085 網膜剥離用 2.5mm ϕ ロング 温度表示有



20711-084 網膜剥離用 10mm T型 温度表示有



20711-088 未熟児網膜症用 1.6mm ϕ 温度表示有



20711-081 白内障用・カーブ 1.9mm ϕ 温度表示有



20711-080 白内障用・ストレート 1.9mm ϕ 温度表示有



2361A ハンドピース用滅菌トレイ 254×152.4×38.1mm 1本用バー付



NIHON SURGE

日本総代理店及び発売元
有限会社 日本サージ

〒564-0054大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル4F

TEL:06-6190-7865(代) FAX:06-6190-7867

E-mail:<nihon-surge@nihon-surge.com>