

MEPRO

眼科用手術台メプロ



OPHTHALMOLOGICAL
EQUIPMENT

● 眼科機器 ●

 TAKARA
BELMONT

眼科用手術台メプロは、 手術に関わる方々に快適な手術環境を提供します。



手術室の効率的な使用に貢献、 省スペースの椅子型手術台に「移動」機能を搭載。

- 眼科専用の椅子型手術台が移動機能を搭載、眼科以外の科目と兼用している一般病院手術室での使用が可能になりました。
- 手術台の固定・移動はワンタッチ式のロックペダルで簡単確実に行えます。



- 「移動」機能を備えたことで清掃も容易、手術環境が常にクリーンな状態に保てます。
- デイスージェリーの対応が、患者さんのQOL（生活の質）を高めます。
- 椅子型なので、保管スペースをとりません。

- フットスイッチは、国際規格IEC60529のIPX8に適合した防水性能を有しています。（水深1mの浸水タンクに60min潜水）

椅子型だから、患者さんの導入から 手術ポジションまでの移行をやさしくサポート。

- 椅子の状態でお年寄りや車椅子の患者さんをやさしく導入します。
- 手術ポジションへの移行がワンタッチ操作でスムーズ、かつスピーディに行えます。
- タカラベルモント独自の油圧技術でソフトスタート、ソフトストップを実現し、患者さんの不安感を和らげます。
- 椅子形状の手術台が身体をやさしくホールド、患者さんに安心感を与えます。
- 抗菌性・耐アルコール性レーザーの採用で清拭も容易、手術台を常にクリーンな状態に保てます。




より安定した体位で、 ドクターの手術ポジションを的確にキープ。




- 背モタレは薄さ約10cm、頭側・耳側のどちらからもアプローチ可能です。
- 人体形状に近い椅子型手術台で患者を支持。術者・アシスタントは広い作業域が得られます。
- 低反発クッションを採用した専用のヘッドレストが頭部をやさしく、かつ、しっかりと保持します。

- 眼球を水平に保つ微細な調整機構を搭載。より的確な手術位が確保できます。

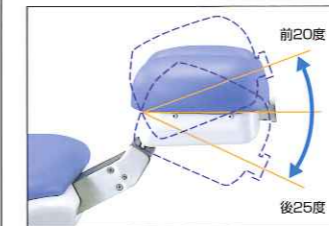

ヘッドレスト角度調整機構（手動）

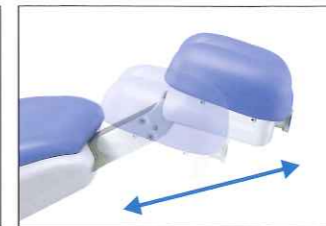

ヘッドレスト上下機構（電動油圧作動）



ヘッドレスト前後屈機構（電動油圧作動）

ACCESSORIES

手術をより効率的にサポートするアクセサリ部品



リストレスト



上肢台



器械台【受注生産】



スクリーン架

COLOR VARIATION

カラーバリエーションは充実の全6色から自由にお選びください。 ※標準色以外の5色は受注生産となります。

標準色 CG19 ブルー

CG23
ライトグリーン

CG16
モーブ



CG17
サフラン



CG18
ディープグリーン



CG3
ライトグレー




SPECIFICATION

仕様

眼科用手術台 MEPRO【DR-130】

- 本体昇降機構
- 背モタレ昇降機構
- ヘッドレスト上下機構
- ヘッドレスト前後屈機構
- ヘッドレスト枕角度調節機構
- 本体移動機構
- 本体上昇、背モタレ下降
レッグレスト上昇
- 本体下降、背モタレ上昇
レッグレスト下降
- 電気定格
- 操作電圧
- 製品質量
- 許可番号

- 電動油圧式、フットスイッチ操作
- 電動油圧式、フットスイッチ操作
- 電動油圧式、フットスイッチ操作
- 電動油圧式、フットスイッチ操作
- マニュアル操作（ネジ式）
- フットペダル操作
- プリセット機能付
- 電動油圧式、フットスイッチ操作
- オートリターン機能付
- 電動油圧式、フットスイッチ操作
- 100V 50/60Hz 4.0/4.2A
- DC12V
- 155kg
- 27BZ0824

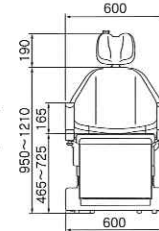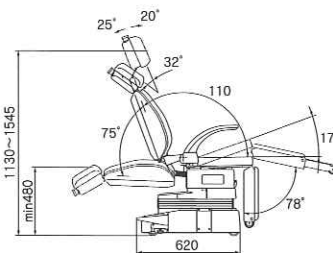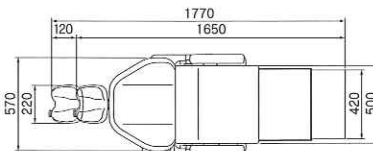

タカラベルモント株式会社

●本社

〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1
〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

TEL.(06)6212-3620
TEL.(03)3401-9795

●お問い合わせは…

●メディカルプロジェクト(P)

札幌P	TEL.(011)863-2139	大阪P	TEL.(06)6211-5947
仙台P	TEL.(022)231-3458	岡山P	TEL.(086)233-8826
東京P	TEL.(03)3401-9795	広島P	TEL.(082)277-6700
金沢P	TEL.(076)221-8412	九州P	TEL.(092)474-7306
名古屋P	TEL.(052)931-5163	鹿児島P	TEL.(099)226-9481

- 価格、仕様、デザインは予告なく変更される場合があります。
- 印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。
- このカタログは2004年6月現在のものです。



安全にお使いいただくために

- ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<http://www.takaramelmont.co.jp/medical>



古紙配合率100%内生紙を使用しています

大豆油インキで印刷しています

100B040605.UP
YY-ME284